

# 1 Jūsu produkts

LV

Paldies, ka izvēlējāties Lola & Lykke® Smart elektrisko krūšu sūknī. Mātes piens ir dabiska izvēle jūsu mazulim ar daudziem labi pierādītiem ieguvumiem veselībai. Kaut arī mātes piens vienmēr ir labākais, ne vienmēr ir viegli nodrošināt mātes pienu savam mazulim. Mūsu viedais elektriskais krūts sūknis tika izstrādāts, lai nodrošinātu mātēm mūsdienīgu un ērtu mātes piena sūknēšanas veidu.

Mūsu krūts sūknī 2-fāzu izteiksmes tehnoloģija atdarina bērna dabisko zīšanas veidu. Automātiskais pārslēgšanās starp funkcijām un atmiņas pogu, lai ērti izsekotu un reģistrētu zīdišanašanas sesijas, padara zīdišanu ar mūsu sūknī bez piepūles. Īpaši mīksts silikona krūšu aizsargs palīdz radīt efektīvu pumpēšanu, nodrošinot ērtu un ātru piena plūsmu. Mūsu krūts sūknī ir antikolikuļs, lēnās plūsmas knupis, kas ļauj jūsu mazulim atkārtot dabiskās nepieredzējušās darbības, kas iemācītas pie krūta, dzerot piena pudeli ar tam paredzēto pienu.

Ekskluzīva zīdišana tiek atzīta par labāko izvēli jūsu mazulim un nodrošina visas uzturvielas jūsu mazulim, kas ir nepieciešamas pirmajos 6 dzīves mēnešos. Zīdišana palīdz izveidot spēcīgu saikni starp māti un bērnu un nodrošina daudzus ilgtermiņa ieguvumus abiem.

## 2 Svarīgi drošības pasākumi

Lietojot elektropreces, it īpaši, ja bērni ir klāti, vienmēr vajadzētu ievērot pamata drošības pasākumus jāievēro. Šis produkts ir pārbaudīts saskaņā ar EN 14350: 2020 Bērnu aprūpes preces - Dzeramā iekārtā.

### PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS INSTRUKCIJAS

Definētie signālvārdi identificē visas instrukcijas, kas ir svarīgas drošībai. To neievērošana instrukcijas var izraisīt ievainojumus vai krūts sūkņa vai sevis bojājumus. Lietojot kopā ar šādiem vārdiem definētie signālvārdi nozīmē:



#### BRĪDINĀJUMS

Var izraisīt nopietrus ievainojumus vai nāvi.



#### UZMANĪBU

Var izraisīt vieglus ievainojumus.



#### PIEZĪME

Var izraisīt materiālus zaudējumus.



#### PADOMS

Noderīga vai svarīga informācija, kas nav saistīta ar drošību.



#### BRĪDINĀJUMS: Jūsu bērna veselībai un drošībai (svarīgi dzeršanas aprikojuma drošības pasākumi):

- Nepārtraukta un ilgstoša šķidruma sūkšana izraisīs kariesu.
- Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru.
- Izmetiet pirmās bojājuma vai vājuma pazīmes.
- Glabājet komponentus, kas netiek izmantoti, bērniem nepieejamā vietā.
- Nekad nelietojiet knupjus kā knupi.
- Vienmēr lietojet šo produktu pieaugušo uzraudzībā.
- Lietošanai tikai ar mātes pienu.
- Nepiemērotas kopējas apkures, tiršanas metodes (ieskaitot, ja piemērojams, nepiemērotus parastos tiršanas līdzekļus), uzglabāšana un lietošana var sabojāt produktu.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet barošanas knupi un velciet barotni visos virzienos. Izmetiet pie pirmās bojājuma vai vājuma pazīmes.
- Neatstājiet barošanas ierīci tiesā saules gaismā vai karstumā, kā arī neatstājiet dezinfekcijas līdzekļi (sterilizējošā šķidumā) ilgāk, nekā ieteicams, jo tas var vājināt sprauslu.



## BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrotraumas vai nopietniem apdegumiem:

- Vienmēr atvienojiet elektrotehniku tūlīt pēc lietošanas, izņemot uzlādes laikā.
- Nenovietojiet un neglabājiet izstrādājumu vietā, kur to var nokrist vai ievilk vannā vai izlietnē.
- Krūts sūknis un piederumi nav karstumizturīgi: turiet prom no apsildāmām virsmām vai atklātas liesmas.
- Nelietojiet viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Pieslēdzot strāvas avotu, krūts sūkni nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- Nekad nedarbiniet elektrisko ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nokritusi vai bojāta. Ja tiek konstatēti bojājumi, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet elektrības kontaktligzdas ierīci, kas ir bijusi pakļauta ūdenim vai ciemiem šķidrumiem, tostarp:
  - Nelietojiet mazgāšanās vai dušas laikā.
  - Nekad nelieciet un nemietiet ūdenī vai citos šķidrumos.
  - Nepalaidiet ūdeni pāri krūts sūknim.
  - Ja ierīce ir bijusi pakļauta ūdenim vai ciemiem šķidrumiem, nepieskarieties, atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, izslēdziet un sazinieties ar ražotāju.



## BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no veselības apdraudējuma un samazinātu traumu risku:


- Šis ir viena lietotāja produkts. Lietošana vairāk nekā vienai personai var apdraudēt veselību un anulēt garantiju.
- Šo ierīci nevar apkalpot vai remontēt. Neremontējiet sevi. Nemodificējiet ierīci.
- Izmantojiet krūts sūknī tikai paredzētajam lietojumam, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet visas atbilstošās sūkņa sastāvdaļas.
- Nelietojiet mikrovilņu krāsni un nevāriet mātes pienu. Sildišana mikrovilņu krāsnī var izraisīt smagus mazula mutes apdegumus no karstajiem punktiem, kas sildišanas laikā mikrovilņu krāsnī veidojas pienā. (Mikrovilņu krāsns var mainīt arī mātes piena sastāvu.)
- Pirms pirmās lietošanas notīriet un notīriet visas daļas, kas nonāk saskarē ar krūts un mātes pienu.
- Pēc katras lietošanas nomazgājiet visas daļas, kas nonāk saskarē ar krūts un mātes pienu.
- Ja krūts sūknis vai piederumi tiek izmantoti bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta droša ierīces uzraudzība vai instrukcijas un viņi saprot saistītie apdraudējumi. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Tīrišanu un lietotāja uzturēšanu bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.

### 3 Sastāvdaļas

LV

Jūsu krūts sūkņa sistēma ietver sevi

- A - Kauss
- B - Krūšu aizsargs
- C - Savienotājs
- D - Motora bloks
- E - Iesūkšanas trauks
- F - Vārsts
- G - Pienā pudele
- H - lēnas plūsmas knupis
- I - Pudeles pamatne
- J - Pudeles vāciņu komplekts
- K - Lādēšanas kabelis

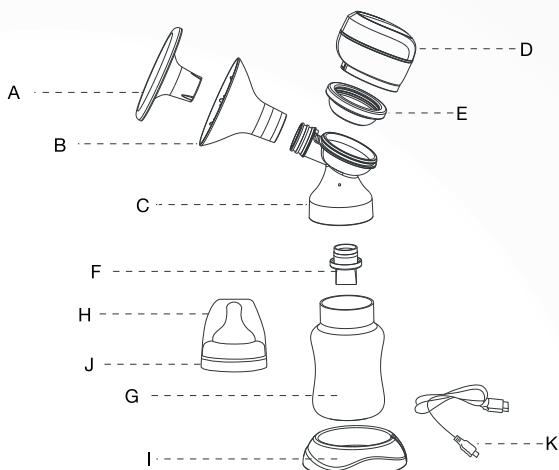

Nesatur bisfenolu-A, DEHP (ftalātu) vai lateksu

Strāvas padeve: 110–240 V, 50–60 Hz


Izslēgšana: 5V 1A

Izmērs: 81x63x67mm

Svars: 650g

Akumulatora jauda un tips: 3,7 V 1400 mAh litija ionu

Dispela ikonas

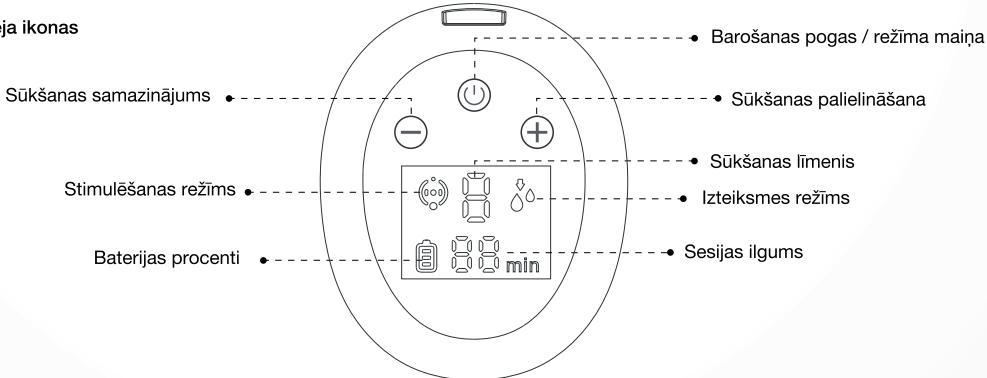

- Ieslēgšanas / izslēgšanas poga: nospiediet 2 sekundes, lai iedarbinātu vai izslēgtu krūts sūkni. Režīma maiņa: pieskarieties ekrānam, lai mainītu režīmu.
- Sākotnējā iestatīšana: Sākotnējais stimulēšanas režīms automātiski pāriet uz izteiksmes režīmu pēc 2 minūšu lietošanas. Digitālajā displejā ir atmiņas poga un taimeris, lai ērti izsekotu un ierakstītu sūknēšanas sesijas. Ieslēdzot, sūkņa atmiņā automātiski tiks izmantoti iepriekšējās sūknēšanas sesijas iesūkšanas iestatījumi. Pēc 30 minūšu lietošanas sūknis automātiski izslēgsies.
- Sūkšanas līmenis: + sūkšanas palielinājums - sūkšanas samazināšanās (stimulēšanas režīms: L1-L6 izteiksmes režīms: L1-L9).
- Akumulatora procentuālais daudzums: norāda atlikušo akumulatora darbības laiku. Lūdzu, uzlādējiet krūts sūkni, ja akumulatora uzlādes līmenis ir mazs.
- Sesijas ilgums: norāda sūknēšanas sesijas ilgumu. Pēc 30 minūšu lietošanas sūknis automātiski izslēgsies.


## 4 Darba sākšana

LV

### ! Piezīme

Pirms pirmo reizi lietojat krūts sūknī, jums jādara šādi:

1. Pievienojiet krūts sūknī ārējam strāvas avotam. Uzlādējiet akumulatoru 2 stundas.
2. Pirms tīrišanas atdaliet visas daļas, kas pakļautas mātes vai mātes pienam.
3. Notīriet sūknī - skatiet 5. sadāļu.

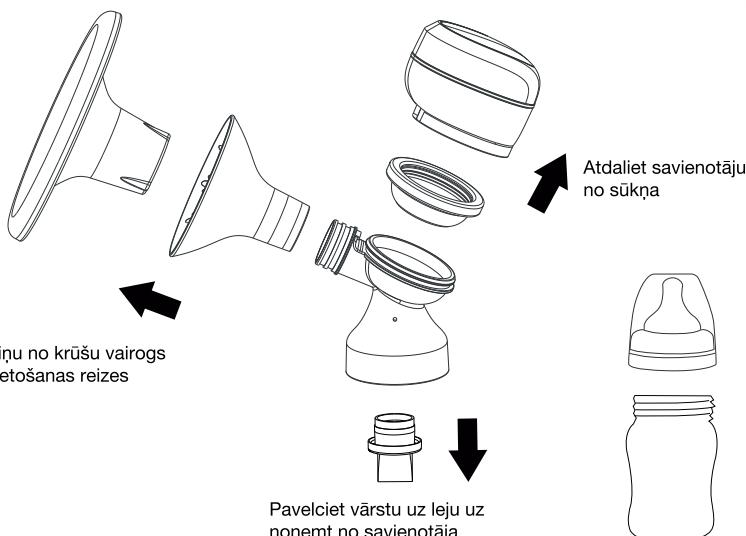

## 5 Tīrišanas pārskats

Mazgāšana un sanitārija ir divas dažādas darbības. Tie jāveic atsevišķi, lai aizsargātu jūs, jūsu mazuli un krūts sūkņa veikspēju.

Mazgāt - tīrīt detaļu virsmas, fiziski noņemot piesārnojumu.

Dezinfekcija- lai iznīcinātu dzīvos organismus, piemēram, baktērijas vai vīrusus, kas var būt uz daļu virsmām.

Mazgāšana	Krūšu vairogs	Krūts sūknēšanas komplekts	Pudele & kauss
Pirms pirmās lietošanas	<input type="checkbox"/> Mazgāt <input type="checkbox"/> Dezinfizēt	<input type="checkbox"/> Mazgāt <input type="checkbox"/> Dezinfizēt	<input type="checkbox"/> Mazgāt <input type="checkbox"/> Dezinfizēt
Pēc katras lietošanas	<input type="checkbox"/> Mazgāt	<input type="checkbox"/> Mazgāt	<input type="checkbox"/> Mazgāt
Reizi dienā	<input type="checkbox"/> Dezinfizēt	<input type="checkbox"/> Dezinfizēt	<input type="checkbox"/> Dezinfizēt

## 6 Tīrišanas instrukcija

LV

Nepieciešamie piederumi:

- Vieglas trauku ziepes
- Notīriet trauku divi vai mīkstu suku
- Notīriet izlietni
- Dzeramā kvalitātes ūdens
- Tirs katis verdošam ūdenim

Mazgājamas vai sanitārijas daļas:

- Krūšu aizsargs
- Piena pudele
- Pudeles korķis
- Savienotājs
- Vārstiņš



### Brīdinājums

- Tūlīt pēc lietošanas atdaliet un nomazgājet visas daļas, kurām ir bijusi saskare ar mātes pienu. Tas palīdzēs nonemt mātes piena paliekas un novērst baktēriju augšanu.
- Tīrišanai izmantojiet tikai dzerama kvalitātes krānu vai ūdeni pudelēs.
- Tīrot vārstus, neizmantojiet mazus priekšmetus, piemēram, otas. Esiet piesardzīgs, neuztaisiet virsmu.
- Izjauciet, mazgājet un izskalojiet visas sūkņa komplekta daļas, kas nonāk saskare ar māti un pienu, izņemot motora bloku.

### 2. Mazgājet pirms lietošanas un pēc lietošanas




1. solis - noskalojiet visas atdalītās daļas, kas skar krūts un mātes pienu, vēsā ūdenī, lai noņemtu mātes piena atlīkumus.

2. solis - 5 minūtes iemērc siltā ziepījūdenī, pēc tam nomazgā un noskal.

3. solis - ļaujiet daļām nožūt. Glabājet sausas detaljas vēsā vietā, kad tās nelieto.

### 1. Izjaukšana

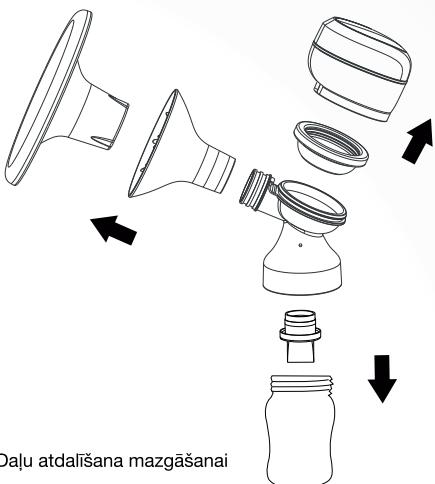

Daļu atdalīšana mazgāšanai



### Piezīme

- Tīrišanas laikā uzmanieties, lai nesabojātu krūts sūkņa komplekta daļas.
- Uzglabājet sausā krūts sūkņa komplektu tīra maišinā / traukā līdz nākamajai lietošanai.
- Rūpīgi nomazgājet rokas.

### 3. Dezinfekcija

pirms pirmās lietošanas un vienu reizi dienā

Plīts virsma



1. solis - piepildiet trauku ar ūdeni, lai tas pārklātu visas daļas. Uzvāra.

2. solis - daļas ievieto verdošā ūdenī 10 minūtes.

3. solis - ļaujiet daļām nožūt. Glabājet sausas detaljas vēsā vietā, kad tās nelieto.

## 7 Motora vienība


LV

Nepieciešamie piederumi:

- Vieglas trauku ziepes
- Tirs trauku dvielis
- Notīriet izlietni vai trauku
- Dzeramā kvalitātes ūdens

Nepieciešamās detaļas:

- Motora bloks

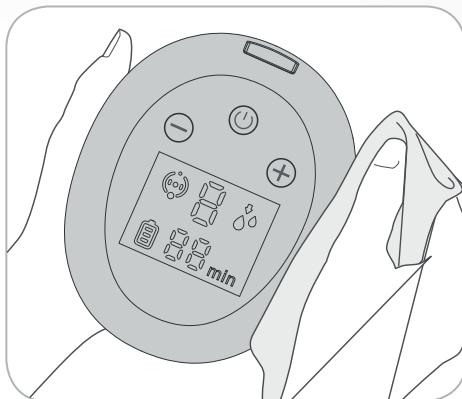

Noslaukiet sūknā bloku ar tīru, mitru drānu.



### Brīdinājums

- Neiegremdējet motora bloku ūdenī; darīt nelietojet ūdeni vīrs motora bloka.
- Tirot motora bloka displeju, izmantojet tikai a mitru, mīkstu drānu ar maigām trauku zlepēm. Cits tīrišanas līdzekļi vai abrazīvas drānas var paslīktināt displeja veikspēju.



## 8 Informācija par zīdīšanu

### Bieži uzdotie jautājumi un atbildes

#### Cik bieži vajadzētu sūknēt pienu no krūts?

Krūts sūknis ir aizstājējs, kad jūs esat tālu no bērna. Ir svarīgi, lai bērns parasti barotu bērnu ar krūti. Piemēram, strādājoša māte var sūknēt 2-3 reizes 8 stundu darba dienas laikā.

#### Cik ilgi jūsu sūknēšanas sesijai vajadzētu ilgt?

Pumpēšanas laiks var atšķirties atkarībā no mātes. Sūknēšanas sesijas parasti ilgst no 15 līdz 30 minūtēm.

#### Kā jūsu krūtīm vajadzētu justies pirms un pēc pumpēšanas?

Pirms sūknēšanas jūsu krūtīm būs stingra, smaga sajūta. Pēc sūknēšanas jūsu krūtīm vajadzētu justies mīkstām bez stingrām vietām. Stingras vietas var norādīt, ka krūts nav pilnībā iztukšota.


## 9 Krūts sūkņa montāža

LV

Nepieciešamās daļas:

- Motora vienība
- Krūšu aizsargs
- Piena pudele
- Iesūkšanas trauks
- Savienotājs
- Vārsts

2

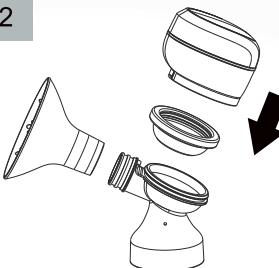

3



(T) Padoms

- Pirms lietošanas pārbaudiet krūts sūkņa komplekta sastāvdaļu pārkājumu vai bojājumus. Ja nepieciešams, nomainiet.
- Vienmēr pārbaudiet visu barotavu, lai izmantotu tīrās līnijas.
- Lai novērstu krūts sūkņa bojājumus, visām sastāvdaļām pirms lietošanas pilnībā jāizķust.


(T) Padoms

Nospiediet sūkšanas trauku un motora bloku savienotājā.


(T) Padoms

Iebīdiet krūšu aizsargu savienotājā.


4

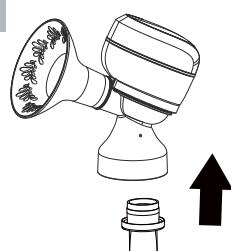

5

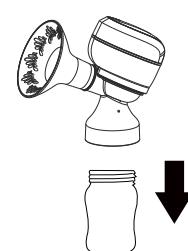

(T) Padoms

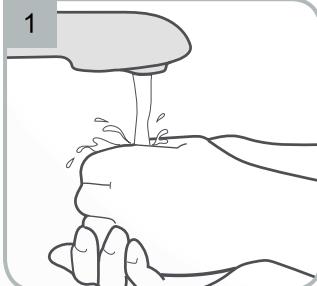

(T) Padoms

Ievietojiet vārstu savienotājā.

(T) Padoms

Nostipriniet piena pudelei savienotājā, pagriezot pulksteņrādiņāja kustības virzienā, līdz tā ir cieši noslēgta.


(T) Padoms

Pirms pieskaraties krūts sūknim, krūts sūkņa komplektam un krūtīm, rūpīgi nomazgājiet rokas ar zlepēm un ūdeni.

## 10 Jūsu krūšu sūkņa barošana

LV

### 10A. Uzlādējama baterija

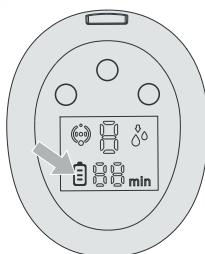

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet krūts sūkņa akumulatoru 2 stundas, savienojot sūkni ar barošanas avotu ar USB savienotāju. Baterijas ikona displejā parādīsies pilnībā uzlādēta, kad uzlāde būs pabeigta.
- Pārejiet pie 10. sadaļas "Krūts sūkņa lietošana" uz sāciet sūknēšanas sesiju.

### 10B. Akumulatora kopšana

Pārejiet pie 10. sadaļas "Krūts sūkņa lietošana" uz sāciet sūknēšanas sesiju.



Tip

- Pirms pirmo reizi lietojat akumulatora energiju, pilnībā uzlādējiet krūts sūkni 2 stundas.
- Akumulatora uzlādes laikā varat izmantot krūts sūkni. Akumulators tiks uzlādēts, tālāk krūts sūknis ir pievienots strāvas avotam. Sūkņa darbības laikā tas netiks uzlādēts.
- Glabājiet sūkni vēsā vietā.
- Turiet akumulatoru uzlādētu.
- Pirms ilgstoši uzglabājat sūkni, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Uzlādējiet akumulatoru, pirms tas pilnībā iztukšojas. Tas ir labāk akumulatora dzīves ciklam.
- Ja jūsu krūts sūknis ir uzglabāts karstā vietā, tas var nedarboties uzreiz ar akumulatora energiju. Lai atjaunotu normālu akumulatora darbību, laujiet krūts sūknim atdzist vienu stundu. Šajā laikā jūs varat izmantot krūts sūkni, kad tas ir pievienots ārējās sienas strāvai.

### Akumulatora uzlādes stāvokļa kodi






(mirgošana) Akumulatora uzlādes statuss / Zema akumulatora uzlāde



Pilnībā uzlādēts

## 11 Krūts sūkņa darbība

LV

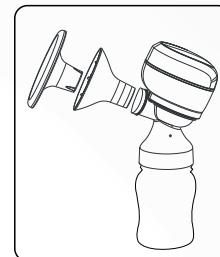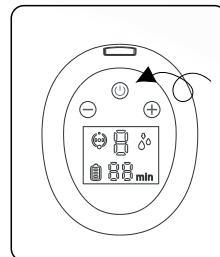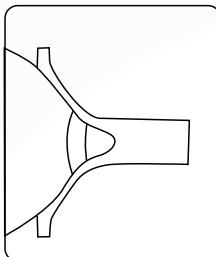

1

Novietojiet krūšu aizsargu uz krūts tā, lai sprausla būtu pareizi centrēta sūkšanas tunelī.

2

Turiet krūšu aizsargu un savienotāju pie krūts ar īkšķi un rādītājpirkstiem. Atbalstiet krūts ar plaukstu.

3

Ieslēdziet krūts sūknī, pieskaroties barošanas pogai un izvēlieties vēlamo režīmu.

4

Izsležiet krūts sūknī, pieskaroties barošanas pogai, izmantojot pogu, un uzlieciet putekļu vāciņu virs krūtim.

### Piezīmes:

- 1 Jūsu krūts sūknis sāksies stimulācijas fāzē. Pielāgojet sūknēšanas līmeni, izmantojot vadības ierīces  $\ominus \oplus$ , lai atrastu ērtu līmeni.

**Stimulācijas fāze** = ātrs sūknēšanas ritms, kas atdarina mazuļa dabisko zīšanas veidu, lai stimulētu piena plūsmu.

- 2 Pēc 2 minūtēm sūknis automātiski pārslēgsies uz izteiksmes fāzi. Pielāgojet sūknēšanas līmeni, izmantojot vadības ierīces  $\ominus \oplus$ , lai atrastu maksimālo ērtā vakuuma līmeni. Ja piens sāk tecēt pirms 2 minūtēm, nospiediet režīma maiņas pogu , lai manuāli pārslēgtos uz izteiksmes režīmu.

**Izteiksmes fāze** = lēnāks sūknēšanas ritms maigai un efektīvai piena savākšanai pēc tam, kad piens ir sācis plūst.

- 3 Kad sūknējat izteiksmes fāzē, palieliniet ātrumu / vakuumu  $\ominus$ , līdz sūknēšana šķiet nedaudz neērta (nav sāpīga), pēc tam nedaudz samaziniet.

## 12 Produkta priekšrocības

LV



Intuitīvas viedās iespējas: 6 stimulācijas līmeņi un 9 izteiksmes līmeņi.

Divfāžu izteiksmes tehnoloģija: stimulēšana / izteiksme. Divi kliniski pārbaudīti sūknēšanas ritmi personificē komfortu. 4 fažu viedā funkcionalitāte: stimulēšana / izteiksme / automātiskā / atmiņa.



Anti-back plūsmas dizains higienai

Slēgta sistēma, kas novērš mātes piena dublēšanos sūknī, novērš infekciju un uztur pienu svaigu.



Īpaši mīksts silikona krūšu aizsargs

Elastīgais, īpaši mīkstais silikona krūšu vairogs jūtas ērti, samazina spiedienu un palīdz masēt krūtis, lai veicinātu novājēšanu un optimizētu piena plūsmu.



Kluss un viegls

Klusais krūts sūknis ļauj diskrēti sūknēt jebkur. Vieglis, pārnēsājams sūknis.

Paredzēts mums, atrodoties celā, kas sūknējas vairākas reizes dienā.



Viegli tīräms un samontējams

Sūknim ir piecu daļu jūra, kuru var salikt un notīrīt, padarot to ērti lietojamu.



Viedā skārienekrāna tehnoloģija

Ērta sūknēšanas pieredze. Digitālajā displejā ir atmiņas poga un taimeris priekš viegli izsekot un reģistrēt sūknēšanas sesijas.



USB uzlādējams akumulators

Izturīga litija baterija ar 2 stundu akumulatora darbības laiku. Mikro USB ports ar standarta USB kabeli pieslēgšanai strāvas avotam.



Racionalizēts bezvadu dizains

Sūknis ir veidots, nēmot vērā stilu. Bez caurulēm, bez vadīem - ērti lietojams jebkur.



Viedais sūknis bez BPA

Sūknis un piederumi ir izgatavoti no materiāliem, kas nesatur BPA. Pumpis ir saderīgs ar standarta bērnu pudelēm.



Anti-Colic Slow Flow zīdaiju pudeles nazis

Ar sūknī tiek piegādāts uzlabots pretkoliku pudelīšu knupis bez BPA ar lēnu plūsmas ātrumu, kas piemērots jaundzimušajam.

## 13 Mātes piena uzglabāšana

- Tiklīdz jūs sūknējat, lieciet mātes piena pudeli vai mātes piena uzglabāšanas maisiņu vēsā vietā, piemēram, vēsā maisiņā, ja neesat mājās.
- Kad esat mājās, mātes piena pudeles vai mātes piena uzglabāšanas maisiņus pārnesiet uz ledusskapī vai saldētavu.

	Mērena temperatūra	Ledusskapis	Ledusskapja saldētavas nodalījums	Dzījā saldētava
Svaigi izsūknetais mātes piens	Maksimāli 4 stundas līdz 25°C	3-5 dienas apm. 4°C	6 mēnešus aptuveni -16°C	12 mēnešus aptuveni. - 18°C
Atkausēta mātes piens (iepriekš sasaldēts)	1 - 2 stundas temperatūrā līdz 25°C	24 stundas apm. 4°C		Nekad nesasaldējiet

- Sasaldēšana laikā nepiepildiet pudeles / maisiņus vairāk par 3/4, lai atstātu vietu paplašināšanai.

Marķējiet pudeles / maisiņus ar sūknēšanas datumu.

- Lai saglabātu mātes piena sastāvdāļas, atkausējiet ledusskapī uz nakti vai turot pudeli / maisiņu zem tekošā siltā ūdens (maks. 37°C).

- Viegli sakratiet pudeli / maisiņu, lai sajauktu atdalītos taukus.

- Neatkausējiet saldēto mātes pienu mikrovīnu krāsnī vai verdoša ūdens pannā (degšanas draudi).

## 14 Mātes piena sagatavošana un barošana

LV

### Mātes piena sagatavošana

#### Brīdinājums

- Neuzsildiet saldētu mātes pienu mikroviļņu krāsnī vai verdoša ūdens pannā.
- Nelietojiet mikroviļņu krāsnī mātes piena sildīšanai. Mikroviļņu krāsnī sildīšana var izraisīt smagus mazula mutes apdegumus no karstajiem punktiem, kas mikroviļņu krāsnī sildīšanas laikā veidojas pienā. Sildīšana mikroviļņu krāsnī var mainīt arī mātes piena sastāvu.
- Atkausējiet mātes pienu nakti ledusskapī. Atkausētais mātes piens ledusskapī uzglabājas 24 stundas. Neatdzesējiet atkausētu mātes pienu.
- Ātri atkausējiet mātes pienu, turot pudeli vai maisiņu zem silta tekoša ūdens.
- Novietojiet noslēgtā pudeli vai maisu bļodā ar siltu ūdeni 20 minūtes, lai to sasildītu līdz ķermēna temperatūrai.
- Ja savienojat svāigu mātes pienu traukā ar jau sasaldētu mātes pienu, pārliecinieties, ka pievienojat mazāku daudzumu nekā jau sasaldētais.

### Zīdišana ar mātes pienu

- Pirms mazula barošanas ar pudeli ieteicams zīdišana labi noteikt.
- Vienmēr pārbaudiet pudeli, sprauslu un citas sastāvdaļas tieši pirms un pēc katras lietošanas reizes. Ja knupis šķiet saplaisājis vai saplēsts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Lai novērstu iespējamu aizrišanās risku, pārbaudiet knupja izturību, uzvelkot sprauslas spuldzes daļu.
- Nemēģiniet palielināt knupja atveri.
- Zidaiņus nedrīkst barot ar pudelēm bez pieaugušo uzraudzības.
- Nipeli nedrīkst lietot kā knupi.
- Zidaiņu pudeles barošanas knupja tips: lēnas plūsmas pretkoliku. ☺

## 15 Simbolu nozīme

### Simbolu vārdnīca

	Barošanas poga / režīma maiņa
	Sūkšanas samazināšana / palielināšana
	Stimulēšanas režīms
	Izteiksmes režīms
	Sūkšanas līmenis
	Baterijas procenti
	Sesijas ilgums
	Šis simbols norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem (saskaņā ar vietējiem noteikumiem).
	Simbols, kas norāda, ka ražotājs ir veicis visus nepieciešamos pasažumus, lai nodrošinātu produkta atbilstību spēkā esošajiem drošības tiesību aktiem izplatīšanai Eiropas Kopienā.
EN 14350: 2020	Šis simbols nozīmē, ka produkts 48 mēnešus atbilst Eiropas Bērnu aprūpes priekšmetu un dzeršanas aprīkojuma standartam AGED bērniem.

## 16 Problēmu novēršana

LV


Ja krūts pumpis neieslēdzas	Pārbaudiet, vai krūts sūknis ir pievienots funkcionējošai elektrības kontaktligzdai. Ja nav strāvas, displejs nedeg un netiek parādīts kļudas bīdinājums.
Ja sūknēšanas intensitāte ir zema vai tā nenotiek	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai visi krūts sūkņa un komplekta savienojumi ir droši.</li><li>Izjauciet sūknēšanas komplektu un pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un nav bojatas.</li><li>Samontējiet sūkņu komplektu, kā norādīts sadaļā Krūts sūkņa montāža (8. nodaļa).</li></ul>
Ja ir mātes piena pārpilde	<ul style="list-style-type: none"><li>Izslēdziet krūts sūknī un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.</li><li>Noslaukiet krūts sūknī ar mitru (nevis slapju) drānu.</li><li>Kad visi komponenti ir sausi, salieciet no jauna</li></ul>

## 17 Ilgtermiņa uzglabāšana


Jūsu krūts sūknī ir uzlādējama baterija. Lai saglabātu krūts sūknī, kad to nelieto ilgstoši laika periodu, tas automātiski pāriet uz uzglabāšanas režīmu.

Lai izņemtu no uzglabāšanas režīma, pievienojiet krūts sūknī ārējam barošanas avotam un pilnībā uzlādējiet akumulatoru līdz 2 stundām.


Pirms uzglabāt krūts sūknī ilgāku laiku atcerieties, ka ir vajadzīgi:

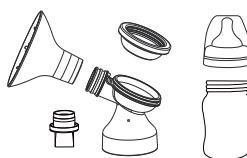

Tīrs krūts sūkņa komplekts (5. sadaļa)

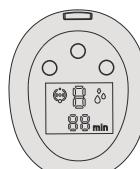

Notīrīts motora bloks (6. sadaļa)

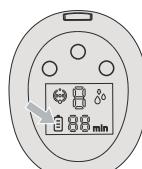

Pārliecinieties, vai krūts sūkņa akumulators ir pilnībā uzlādēts

## 18 Tehniskā specifikācija

Jaudas režims	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9
Sūkšana (Kpa)	18.9	21.5	24.5	30.7	33.8	36.9	38.9	40.9	42.9
Stimulēšanas režīms	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L6-Ātri	L6-Lēni		
Sūkšana (Kpa)	3.9	9.7	12.8	17.4	20.5	12.8	38.9		